

# NANOVLÁKENNÁ KOMUNITNÍ ROUŠKA

 **BreaSAFE**<sup>®</sup>  
COMMUNITY MASK FFP2 NR



Lehká a odolná komunitní  
rouška ochranné třídy FFP2

5 ks v balení

CERTIFIKOVÁNO DLE NORMY EU:  
**EN 149:2001 + A1:2009**



Záchyt  $\geq 94\%$



Ochrana proti  
mikroorganismům

## UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI:

**VYŠŠÍ MÍRA OCHRANY:** Nanovlákená membrána poskytuje vyšší míru ochrany uživatele před nemocí COVID-19.

**OPAKOVANĚ POUŽITELNÁ:** Při správné manipulaci lze jako ochranu před mikroorganismy používat několik dní. Možnost dezinfikovat (aerosolovým rozprašovačem či ručně vyprat ve vodě s dezinfekcí).

**DOKONALE TĚSNÍCÍ:** Nosní spona umožňuje dokonalé utěsnění kolem nosu.

**LEHKÁ a SKLADNÁ:** Rouška váží pouhé 4 g a vejde se téměř všude - můžete ji mít stále u sebe.

**POHODLNÁ:** Kopíruje tvar obličeje a dobře na něm sedí.

**PRODYŠNÁ:** Snadné a pohodlné dýchání.

Komunitní maska BreaSAFE<sup>®</sup> COMMUNITY MASK FFP2 je velmi lehká a skladná rouška, která snižuje pravděpodobnost možné nákazy virem SARS-CoV-2. Je vyrobena z nanovlákené membrány, která zajišťuje vysokou míru ochrany a prodyšnosti. Záchyt minimálně 94 % pevných (průměrná velikost částic 0,6  $\mu\text{m}$ ) nebo kapalných (průměrná velikost částic 0,4  $\mu\text{m}$ ) částic v ovzduší.

Testy provedené renomovanými institucemi, jako je např. Nelson Laboratories USA (jedna z mála laboratoří na světě, která měří virální a bakteriální filtrační účinnost - VFE, BFE), potvrdily u použité membrány výjimečnou výši záchytu částic ( $\geq 99,9\%$ ) a díky tomu vysokou účinnost v boji proti mikroorganismům (např. vir SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID - 19).


S hrdostí vyvinuto a vyrobeno  
v České republice.



Vše o BreaSAFE<sup>®</sup>  
produktech:

[www.breasafe.com](http://www.breasafe.com)

[www.nano4fibers.com](http://www.nano4fibers.com)

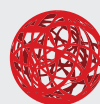

**NANO4FIBERS**  
PARDAM

Účinná a dostupná ochrana před COVID-19


## Lehká a odolná komunitní rouška ochranné třídy FFP2

Komunitní rouška BreasaSAFE<sup>®</sup> COMMUNITY MASK FFP2 NR byla vyvinuta jako ochrana proti mikroorganismům. V případě, že ji používána pro tyto účely, lze ji bezpečně nosit po dobu několika dní (cca týden až dva v závislosti na prostředí, aktivitě a péči o ni).

Interně provedené laboratorní testy použité membrány prokázaly zachování filtračních schopností i po 14 dezinfekčních cyklech.

Při testování nebyla prováděna zkouška zanášení prachem (DRB 4/15 dolomitický prach). Roušku tak lze používat jako Osobní ochranou pomůcku (např. pro průmyslové použití) po dobu jedné směny (označení NR). Roušku nelze čistit od zanesení prachem.

## ÚČINNOST ZÁCHYTU

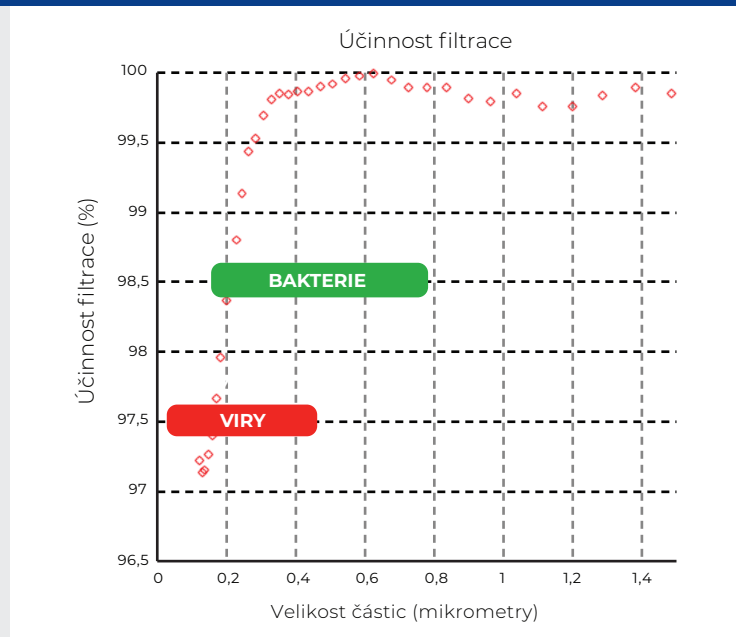

### Návod k použití

1. Důkladně si umyjte ruce.
2. Vyjměte roušku z obalu a vizuálně ji zkontrolujte. Pokud vidíte poškozené nebo chybějící části (nosní spona, gumička), změny barev nebo jiná viditelná poškození - roušku nepoužívejte.
3. Roušku přiložte k obličeji a gumičky opatrně uchyťte za uši.
4. Opatrně přitlačte na nosní sponu a vylepšete tak těsnost roušky v oblasti nosu.
5. Provéřte těsnost roušky: Silně se nadechněte. Jestliže zjistíte pronikání vzduchu mezi rouškou a obličejem, zlepšení těsnosti dosáhnete:
  - posunutím roušky na obličeji do vhodnější polohy,
  - tvarováním nosní spony.

### Návod na údržbu

V případě, že se rozhodnete používat roušku jako ochranu proti mikroorganismům, doporučujeme ji po každém použití ručně vyprat ve vodě s dezinfekcí na bázi lihu nebo isopropanolu nebo aplikovat dezinfekci formou aerosolového rozprašovače na vnější i vnitřní stranu roušky.

#### Z důvodu rizika poškození membrány nedoporučujeme:

- dezinfikovat prostředky na bázi peroxidu vodíku,
- sterilizovat UV lampou nebo ozónem.

#### Roušku nepoužívejte, jestliže:

- škodlivé částice pronikly rouškou a bylo zjištěno znečištění, zápach nebo jiný příznak průniku škodlivin,
- došlo k podstatnému zvýšení dýchacího odporu.

